
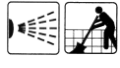


ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ НЕОНАТОЛОГІЇ

Область застосування	Спосіб застосування	Періодичність використання	Засіб	Концентрація і експозиція	Хто виконує
Руки і шкіра					
	Миття рук і шкіри	У випадку необхідності. Після забруднення. У всіх випадках перед хірургічною та після гігієнічної дезінфекції рук	Санософт Деконтадез	Концентрат, 2-3 мл на руки	Весь персонал
	Гігієнічна дезінфекція рук	У випадку необхідності. Перед прийомом, після перерви, після прийому кожного пацієнта	Дезодерм Деконтадез	3 мл – 30 с.	Весь персонал
	Хірургічна дезінфекція рук	Перед хірургічним втручанням	Дезодерм Деконтадез	2 x 5 мл по 2 - 3 хв.	Операційний персонал
	Обробка ін'єкційного поля	Перед пункціями і ін'єкціями. Перед пункціями і ін'єкціями суглобів, порожнин тіла і порожнистих органів	Дезодерм забарвл. Деконтадез забарвл.	Стерильними марлевими тампонами, змоченими засобом, 15 с. – 1 хв.	Лікарі, медичні сестри
	Догляд	За необхідності			

Інструменти (ВМП з гуми, пластмаси, металів, скла, включно з ларингоскопами, хірургічними інструментами, реанімаційним інвентарем (крім ендоскопів))					
	Дезінфекція	Відразу після використання інструменти у розібраному вигляді занурюють у розчин засобу, витримують відповідно до часу експозиції вибраного режиму, виймають з ємкості і відмивають від залишків розчину під проточною холодною водою впродовж 1 хв.	Фамідез® форте Фамідез® Ендо	Фамідез® форте 1%, 60 хв./5 хв.* Фамідез® Ендо 1%, 60 хв./5 хв.*	Операційний персонал, медичні сестри
	Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням	Відразу після використання інструменти у розібраному вигляді занурюють у розчин засобу, витримують відповідно до часу експозиції вибраного режиму, виймають з ємкості і відмивають від залишків розчину під проточною холодною водою впродовж 1 хв.	Фамідез® форте Фамідез® Ендо	Фамідез® форте 1%, 60 хв./5 хв.* Фамідез® Ендо 1%, 60 хв./5 хв.*	Операційний персонал, медичні сестри
	Дезінфекція високого рівня та стерилізація	Інструменти у розібраному вигляді занурюють у розчин засобу, витримують відповідно до часу експозиції вибраного режиму, виймають з розчину і переносять у розчин із стерильною водою. Відмивання здійснюють протягом 3 хв. при повному зануренні інструментів у стерильну воду.	Фамідез® форте	ДВР: Фамідез® форте 2%, 15 хв. Фамідез® Ендо 3%, 15 хв. Стерилізація: Фамідез® форте 6%, 120 хв. Фамідез® Ендо 3%, 180 хв.	Операційний персонал, медичні сестри

Поверхні (кювети, медична апаратура, тонометри, маніпуляційні столи, загальні поверхні приміщень, санітарно-технічне обладнання)					
	Дезінфекція невеликих і важкодоступних поверхонь шляхом зрошування	Щоденно за необхідності: поверхні у приміщенні, предмети обстановки, інструменти простої конфігурації рівномірно зросити засобом до повного зволоження	Фамідез® АФ Нью Фамідез® АФ Саноксіл 006	Бактерії: Фамідез® АФ Нью, нерозв. 30 с. Фамідез® АФ, нерозв. 2 хв. Саноксіл 006, нерозв. 15 хв. Туберкульоз: Фамідез® АФ Нью, нерозв. 30 с. Фамідез® АФ, нерозв. 5 хв. Саноксіл 006, нерозв. 60 хв.	Медичні сестри, санітари
	Дезінфекція профілактична, поточна, заключна поверхонь приміщень, предметів обстановки та догляду за хворими, приладів, ВМП, апаратів (включно з кюветами), санітарно-технічного обладнання. Генеральні прибирання	Щоденно і за необхідності: знезаражені поверхні протирають ганчір'ям, змоченим розчином засобу. Санітарно-технічне обладнання очищають щіткою або йоржом, змоченим розчином засобу. Саноксіл 006 не потребує змивання водою з будь-яких поверхонь, Фамідез®, Фамідез® Комбі, Санокварт – лише з тих, що не контактують із шкірою пацієнта або продуктами харчування	Саноксіл 006 Фамідез® Фамідез® Комбі Санокварт	Бактерії і віруси: Саноксіл 006, нерозв. 15 хв. Фамідез®, 0,25% 60 хв. Фамідез®, 0,5% 30 хв. Фамідез® Комбі, 0,25% 30 хв. Фамідез® Комбі, 0,5% 15 хв. Санокварт, 1,0 % 60 хв. Санокварт, 2,0% 15 хв. Туберкульоз: Саноксіл 006, нерозв. 60 хв. Фамідез® Комбі, 0,25% 30 хв. Фамідез® Комбі, 0,5% 15 хв.,	Медичні сестри, санітари

* - при обробці ультразвуком